



GEBRUIKSAANWIJZING SHAKE ALERT

Groot display wekker met trilschijf voor slechthorenden

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aanloop van uw SHAKE-ALERT. Wij willen graag dat u ons product tot uw tevredenheid gebruikt. Daarom hebben wij een gebruiksvriendelijke handleiding gemaakt. Lees deze en heb nog veel plezier met uw SHAKE-ALERT.

Plaatsing en onderhoud:

- Houd het apparaat vrij van vocht en stof
- Gebruik voor het reinigen een zachte doek (voorkom indrukken van toetsen)
- Gebruik géén poets- of reinigingsmiddelen omdat die het oppervlak of de inwendige electronica kunnen aantasten.
- Wij adviseren het toestel op een aparte ondergrond te plaatsen omdat de rubberen voetjes op sommige oppervlakken afdrukken kunnen maken.

In de verpakking dient u de volgende onderdelen aan te treffen:

1. SHAKE AWAKE wekker
2. 12V-netvoeding 500mA
3. Trilkussen
4. Handleiding

Installatie

Indien u batterij back-up wilt gebruiken, doet u als eerste een 9V batterij in het batterijcompartiment. De batterij zorgt ervoor dat de tijd door blijft lopen, wanneer de stroom uitvalt. Sluit de plug van de trilschijf aan op de aansluiting  in de wekker. Sluit daarna de adapter aan op de "12V AC power" aansluiting. Doe de adapter in het stopcontact. De cijfers beginnen nu te knipperen.

Wekkerbediening

1 Tijd instellen (Set clock)

- Houd de toets klok instellen ingedrukt.
- Druk op de toets van Hour (uur) en Min. (minuten) en houd deze ingedrukt tot de display de juiste tijd aangeeft.
- Laat de toets klok instellen los.

2 Wektijd instellen (Set alarm)

- Houd de toets set alarm instellen ingedrukt.
- Druk op de toets van Hour (uur) en Min. (minuten) en houd deze ingedrukt tot de display de juiste tijd aangeeft.
- Laat de toets alarm instellen los.

3 Alarmfunctie instellen

Selecteer de gewenste alarmfunctie door de selectieknop in de desbetreffende stand te zetten:

AUDIO - Geluidssignaal en verlichte sluimerknop

SHAKER - Trilschijfsignaal en verlichte sluimerknop

LAMP - Alleen verlichte sluimerknop

OFF - Géén alarm

Let op: Wanneer een van de alarmfuncties is geselecteerd, verschijnt de alarminicator rechtsonder in de display, als het alarm afgaat gaat deze knipperen.

Sluimertoets (Snooze)

Wanneer de gekozen alarmfunctie afgaat na het bereiken van de ingestelde wektijd, kunt u op de sluimertoets drukken waarmee het alarm gedurende 9 minuten wordt uitgeschakeld. Na het verstrijken van de 9 minuten gaat het alarm opnieuw af. De sluimerfunctie blijft gedurende maximaal 2 uur actief en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

Dimmschakelaar

Met HI of LOW kunt u de helderheid van de display instellen.

Volumeregelaar (Volume)

Hiermee stelt u het volume van het geluidssignaal in.

Toon (Tone)

Hiermee stelt u de toonhoogte van het geluidssignaal in.

Batterij voor noodvoeding

De klok werkt ook zonder dat er een batterij is geplaatst. Als een batterij is geplaatst, worden de instellingen voor (wek)tijd bewaard in geval de netspanning wordt onderbroken als gevolg van een stroomstoring of het uitnemen van de netvoedingsadapter. Vervang de batterij jaarlijks. Een lekkende batterij kan schade aan uw SHAKE-ALERT veroorzaken.

Storingen verhelpen

Op de display verschijnen geen cijfers

1. Controleer of de netvoedingsadapter op de juiste wijze is aangesloten op zowel het apparaat als het stopcontact.
2. Kijk of het apparaat wel werkt als u de stekker van de netvoedingsadapter in een ander stopcontact steekt.

De kussentriller werkt niet

1. Controleer of de kussentriller op de juiste aansluiting aan de achterzijde van het apparaat is aangesloten.
2. Controleer of de alarmfunctieschakelaar is ingesteld op trilfunctie.
3. Voer een test uit van de trilfunctie om te zien of deze goed werkt.

Er klinkt géén geluidssignaal


1. Controleer of de alarmfunctieschakelaar op de alarfunctie is ingesteld. Zet de volumeregeling hoog.
2. Stel een nieuwe wektijd op een minuut later in

Garantie

Vanaf het moment dat uw MCS product is aangeschaft, geeft MCS garantie voor de periode van een jaar. Tijdens deze tijd, zijn alle reparaties of vervangingen (naar onze keuze) vrij van kosten. Indien u een probleem ondervindt bezoek onze website op www.multicaresystems.com.

De garantie geldt niet voor ongelukken, nalatigheid of breuken op alle onderdelen. Het product mag niet worden geopend of uit elkaar gehaald door iemand die niet over toestemming van MCS beschikt. De MCS garantie beperkt op geen enkele wijze de grenzen van uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: uw kassabon is een onderdeel van uw garantie en moet bewaard en overhandigd worden bij een garantieclaim.

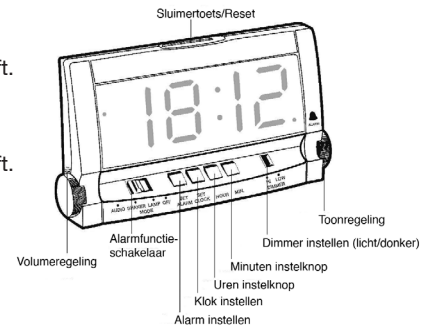



MODE D'EMPLOI SHAKE ALERT

Réveil avec écran large et vibrante pour malentendants

Introduction

Félicitations pour avoir choisi le SHAKE ALERT. Nous vous souhaitons le meilleur produit, vous pouvez obtenir, nous avons donc développé un guide simple. Lisez et appréciez votre SHAKE ALERT.

Où mettre votre secouer et comment en prendre soin:

- Gardez-le loin de la chaleur, la poussière lumière directe du soleil et l'humidité.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux (essayez de ne pas appuyer sur les boutons).
- Ne jamais utiliser de vernis ou de produits de nettoyage, ils pourraient endommager la finition ou l'électricité à l'intérieur

REMARQUE: nous vous conseillons que le secouer est placé sur une nappe ou similaires, telle pieds en caoutchouc pouvez marquer certaines surfaces
Votre forfait comprend:

1. unité principale
2. vibreur de lit
3. 12V AC 500mA
4. Manuel d'utilisation

Installation

Si vous avez besoin de batterie de secours, commencer par installer une pile 9V dans le compartiment à piles. La batterie tiendra le temps si l'énergie électrique est coupée.

Mettez le bouchon de shaker dans « », puis insérez la fiche de l'adaptateur AC dans POWER AC '12V 'socket.

Branchez l'adaptateur secteur à votre ligne électrique. Les chiffres de l'affichage s'allument et le flash.

Opération

Régler l'heure

- Appuyez sur le bouton CLOCK et maintenez
- Appuyez sur ou appuyez et maintenez sur la touche HOUR ou MIN (minutes) jusqu'à ce que l'heure correcte et les minutes apparaissent sur l'écran.
- Communiqué de bouton SET CLOCK

Régler le réveil

- Appuyez et maintenez le bouton SET ALARM
- Appuyez sur ou appuyez et maintenez sur la touche HOUR ou MIN (minutes) jusqu'à ce que l'heure correcte et les minutes apparaissent sur l'écran
- Communiqué de SET bouton ALARM

Mode

Choisissez le mode d'alarme que vous souhaitez être réveillé, déplacer le sélecteur MODE sur le choix suivant:

AUDIO - Buzzer et bouton snooze lumineux

SHAKER - Shaker et le bouton snooze lumineux

LAMP - bouton snooze seulement éclairée

OFF - Pas d'alarme

NOTE: dans Shake / AUDIO / mode de la lampe, un point rouge s'affiche dans le coin inférieur right de l'écran. Lorsque l'alarme, le point rouge clignote.

Snooze

Arrêt momentané de l'alarme. Quand l'horloge est alarmante, appuyez sur le bouton SNOOZE / RESET sur le dessus. Le mode d'alarme sera à nouveau en 9 minutes, le temps total d'activation est d'env. deux heures.

Dimmer


Choisissez HI ou LOW luminosité de l'écran brillera.

Volume

Règle le volume de l'avertisseur sonore.

Tone

Règle le ton de l'avertisseur sonore en fonction de votre audience.

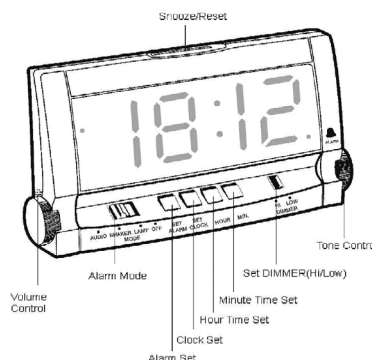

Batterie de secours

Il n'est pas nécessaire d'insérer une batterie pour l'horloge de fonctionner. Avec la batterie de back-up, l'horloge affiche toujours l'heure et les réglages d'alarme en cas de coupure de courant ou de l'adaptateur secteur est débranché. Lors d'une coupure de courant, l'horloge ne sera pas afficher l'heure, le SHAKER / AUDIO / LAMP fonction. Vérifiez l'état de la batterie après un an, en remplacement de la pile usagée. Une pile qui fuit peut détruire votre horloge.

Dépannage

Problème Contrôles

Pas de chiffres sur l'écran

1. vérifier si l'adaptateur secteur est branché à la prise d'alimentation et de l'horloge
2. Vérifiez l'adaptateur AC dans une autre prise d'alimentation

Shaker ne pas agiter

1. assurez-vous que le vibreur est connecté à la prise du vibreur à l'arrière de l'horloge
2. Assurez-vous que le commutateur de mode est en position vibreur
3. re-régler l'heure d'alarme nouveau 1 minute plus tard pour le test

Pas d'alarme buzzer.

1. Assurez-vous que le commutateur de mode est en position audio
2. commutateur de volume se tourner vers HI
3. réinitialiser heure de l'alarme à nouveau 1 minute plus tard pour le test

Garantie

Cet appareil est garanti un an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez www.multicaresystems.nl

IMPORTANT: Votre reçu est partie de votre garantie et doit être conservé et présenté en de demande de garantie.